



## INSTRUCTIEKAART STEVE



Het hulpmiddel Steve kan u helpen met het aantrekken van steunkousen. Het is een halve koker die u staand, zittend of liggend kan gebruiken.

**Hoe gebruikt u de Steve?** Bij het aantrekken van steunkousen


- 1** Plaats de koker op een goede werkhoogte, bijvoorbeeld op tafel.
- 2** Span de steunkous om de koker. Dit doet u door de bovenrand van de steunkous om de koker te slaan en deze over de Steve te stropen tot het hielstuk te zien is en voor de helft over de rand van de koker zit. Als u anti-sliphandschoenen draagt, gaat dit gemakkelijker.
- 3** Controleer of de hak van de kous in het midden zit.
- 4** Zet de koker met de steunkous op de grond. Een antislipmatje kan hierbij helpen.
- 5** Stap in de steunkous en schuif de koker langzaam langs uw been omhoog.
- 6** Breng de steunkous goed in positie, zodat er geen plooien meer zijn.

**De instructies gaan verder op de volgende pagina.**





# INSTRUCTIEKAART STEVE

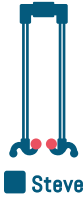

**Hoe gebruikt u de Steve?** Bij het uittrekken van steunkousen

- 1** Haal de koker los door het zwarte knopje in te drukken. Als u de Steve horizontaal houdt, gaat dit gemakkelijker.
- 2** Neem de ring en zorg dat u 'Steve' kan lezen.

- 3** Plaats de zwarte ring om uw been met de opening naar voren gericht.
- 4** Schuif de ring aan de ene zijde een aantal centimeter onder de boord, schuif vervolgens de andere zijde een aantal centimeter onder de boord. Zorg dat de ring evenwijdig onder de kous zit.
- 5** Pak de handvatten van de Steve en steek uw voet tussen de handvatten door.
- 6** Plaats het groene gedeelte recht boven de ring.
- 7** Beweeg de Steve naar beneden. Als de Steve de grond raakt duwt u deze onder uw voet van u af.

Bekijk voor de meest actuele uitleg altijd de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel. Hier zitten ook vaak plaatjes die laten zien hoe het hulpmiddel werkt.

## Meer zien?

Bekijk het filmpje: [youtube.com/watch?v=IWDeuvZ7uI0](https://youtube.com/watch?v=IWDeuvZ7uI0)



## Meer lezen?

Ga naar: [hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/halve-koker](https://hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/halve-koker) of scan de QR code:

